

Recept- en bestelformulier Curetex bovenlichaamsbandages met mouwen.

Bestellen via: info@varodem.nl, helpdesk voor advies: 0475 589 302 of info@varodem.nl

Datum: - - -

IN TE VULLEN DOOR DE BEHANDELENDE ARTS/VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST

Stap 1: indicatiestelling voor compressiehulpmiddel t.b.v. oedeemreductie	
<input type="checkbox"/> oedeem:	
<input type="checkbox"/> lymfoedeem:	
Stap 2: aanduiding te behandelen lichaamsdeel	
<input type="checkbox"/> borst <input type="checkbox"/> flank <input type="checkbox"/> buik <input type="checkbox"/> (boven)arm	
Stap 3: compressiehulpmiddel t.b.v. oedeemreductie ter compensatie van langdurig functieverlies van bloed- en/of lymfevaten. <input checked="" type="checkbox"/>	
Stap 4: behandelduur	Stap 5: draagadvies
<input type="checkbox"/> kortdurig (< 3 weken)	<input type="checkbox"/> dag en nacht
<input type="checkbox"/> langdurig (> 3 weken)	<input type="checkbox"/> dag
<input type="checkbox"/> permanent	<input type="checkbox"/> nacht
Stap 6: naam, handtekening en stempel (huis)arts/verpleegkundig specialist:	
specialisme:	AGB-code:
naam praktijk/instelling, adres en plaats + handtekening en stempel:	
Stap 7: bestemd voor:	
naam patiënt:	
geboortedatum:	
postcode:	
huisnummer:	
verzekeraar:	
Stap 8: besteld door:	
naam praktijk:	
afleveradres praktijk:	
contactpersoon:	
telefoonnummer:	


Stap 1: model		Stap 2: aantal en kleur	
model:	<input type="checkbox"/> CRTX7031 (dames)	aantal:	
lengte:	<input type="checkbox"/> kort tot onder borst <input type="checkbox"/> lang tot aan heup (A)	kleur:	<input type="checkbox"/> beige
sluiting:	<input type="checkbox"/> 2 rij haak-/oog (klein) <input type="checkbox"/> 3 rij haak-/oog (groot) <input type="checkbox"/> rits (Z)		<input type="checkbox"/> zwart
optie:	<input type="checkbox"/> siliconenband op heup (S)		<input type="checkbox"/> wit

Stap 3: maten	
omvang op borst op tepel hoogte circulair gemeten: cm	
cupmaat:	
<input type="checkbox"/> VaroPad borst <input type="checkbox"/> maat 1 / cup A-B <input type="checkbox"/> maat 2 / cup C-D <input type="checkbox"/> maat 3 / cup E-F aantal:	
<input type="checkbox"/> losse VarodemPad square aantal: 2 / 4 / 6	
<input type="checkbox"/> Spanning mouwen: links <input type="checkbox"/> wel <input type="checkbox"/> niet rechts <input type="checkbox"/> wel <input type="checkbox"/> niet	
Referentie: totale lengte van oksel tot heup is gem. 40 cm. Lengte mouwen minimaal 20 cm.	


Stap 4: opties		
<input type="checkbox"/> pocket prothese:	<input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> links
<input type="checkbox"/> 1 cup, 1 vlak of 2 vlak:	<input type="checkbox"/> rechts vlak	<input type="checkbox"/> links vlak
<input type="checkbox"/> verschillende cups (va. 2 maten verschil):	<input type="checkbox"/> cupmaat rechts	<input type="checkbox"/> cupmaat links
<input type="checkbox"/> diepere halslijn (deze optie is niet geschikt bij grote cupmaten >D)		
<input type="checkbox"/> extra ondersteuning borst katoen (bij grote cupmaten >C): <input type="checkbox"/> beiderzijds <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> rechts (niet mogelijk op korte modellen)		
<input checked="" type="checkbox"/> katoenen voering in oksel (standaard)		

Zie achterzijde formulier voor de maattabellen.

Overzicht Curetex modellen bovenlichaam en opties

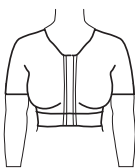	<p>CRTX7031 (A) hoge halslijn en sluiting voorzijde; keuze uit: haak-/oog of rits. Ook verkrijgbaar als lang model tot de heup. Standaard afgewerkt met een kanten boordje op de mouwen.</p>	<p>Opties</p> <ul style="list-style-type: none"> • pocket prothese • 1 cup, 1 vlak of 2 vlak • diepere halslijn • verschillende cupgrootte va. 2 cupmaten verschil • extra ondersteuning borst katoen op de lange modellen • siliconenband op de heup
---	---	--

Curetex meetpunten

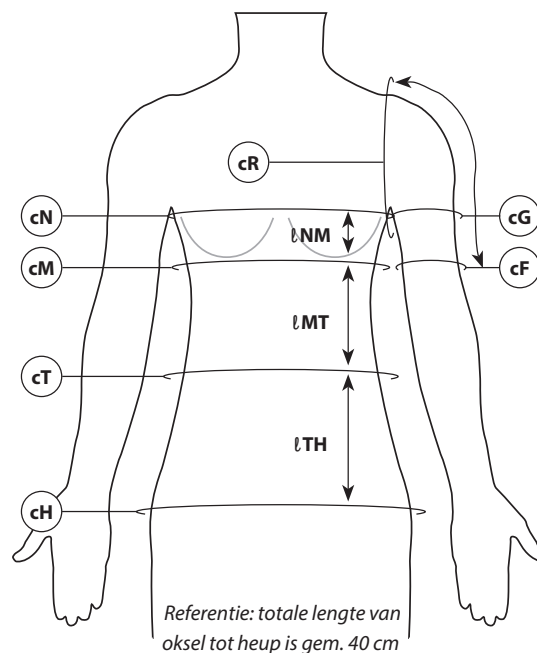

Toelichting meetpunten

- cR: de omvang oksel-schouder. Vraag de patiënt de arm op te tillen en leg uw meetlint onder de oksel. Vraag de patiënt de arm te laten hangen (grootste omvang) en meet de omtrek over de schouder (breedste gedeelte). Meet hierbij niet strak.
- cN: de omvang boven de borst. Leg het meetlint onder de oksel door en vraag de patiënt goed in en uit te ademen, neem de grootste omvang. U hoeft het meetlint niet strak aan te trekken. Zorg ervoor dat het meetlint ook aan de achterzijde recht ligt.
- cM: de omvang net onder de borst. Zorg ervoor dat u deze omvang meet met de BH aan of door de borst(en) op te tillen. Vraag ook hier aan de patiënt om in en uit te ademen, neem de grootste omvang.
- cT: vraag de patiënt de handen in de taille te zetten en meet hier de omvang.
- cH: dit is de grootste omvang van de buik. Zet daar waar u de omvang meet ook gelijk een streepje aan de zijkant van het lichaam met een huidpen. Dit maakt het makkelijker op de lengtematen te meten.
- cG: de omvang twee vingers uit de oksel.
- cF: de omvang daar waar de mouw moet eindigen.

Lengtematen: allemaal aan de zijkant van het lichaam gemeten.

- lMN: de afstand tussen boven de borst en onder de borst. Hoe groter de cupmaat, hoe groter deze maat.
- lMT: de afstand tussen onder borst en de taille.
- lTH: de afstand tussen de taille en het einde van de bandage.
- lengte mouw: meet de lengte van de mouw niet te kort (minimaal 20 cm). Meet vanaf het AC-gewricht tot daar waar de mouw moet eindigen.

Tel bovenstaande lengtematen bij elkaar op en dan komt u gemiddeld op 40 cm uit.

Te combineren met:

	<p>Borstpad (V837) Verrijgbaar in drie confectiematen: maat 1 - Cup A/B, maat 2 - Cup C/D of maat 3 - Cup E/F. Ook verkrijgbaar naar maat. De pad loopt door op de flank om lokaal extra druk te geven.</p>
	<p>Varodem Pad (square) set van twee stuks à 12 x 16 cm (zelf op maat te knippen)</p>